





La **curettage parodontale** o **detartrasi** è un trattamento dentale che coinvolge la pulizia delle radici dei denti per rimuovere il tartaro, la placca batterica e i tessuti infetti o infiammati dalla zona intorno alle radici.

Durante il processo di curettage parodontale, il dentista o l'igienista dentale utilizza strumenti speciali come curette e scalers per raschiare via il tartaro e la placca che si sono accumulati al di sotto della linea gengivale e lungo le radici dei denti. Questo aiuta a rimuovere le fonti di infiammazione e infezione, promuovendo la guarigione delle gengive e il miglioramento della salute parodontale.

Le **curette** sono strumenti manuali progettati per la rimozione del tartaro e della placca dalla superficie radicolare dei denti e dalle tasche parodontali. Hanno punte arrotondate e un bordo tagliente curvato. Questa forma consente un accesso sicuro alle tasche parodontali profonde senza danneggiare i tessuti molli.

**Gli scalers** sono strumenti manuali utilizzati principalmente per la rimozione del tartaro sopragengivale. Hanno punte appuntite e bordi taglienti su entrambi i lati della lama. Questo design è ideale per raschiare via il tartaro sopra la linea gengivale.



**Periodontal curettage or scaling** is a dental treatment that involves cleaning the roots of the teeth to remove tartar, bacterial plaque, and infected or inflamed tissues from the area around the roots.

During the periodontal curettage process, the dentist or dental hygienist uses special instruments like curettes and scalers to scrape away the tartar and plaque that have accumulated below the gum line and along the roots of the teeth. This helps to remove sources of inflammation and infection, promoting the healing of the gums and improving periodontal health.

**Curettes** are manual instruments designed to remove tartar and plaque from the root surface of the teeth and periodontal pockets.

They have rounded tips and a curved cutting edge. This shape allows for safe access to deep periodontal pockets without damaging the soft tissues.

**Scalers** are manual instruments primarily used for the removal of supragingival tartar.

They have pointed tips and sharp edges on both sides of the blade. This design is ideal for scraping away tartar above the gum line.

# Gracey Curettes



**34**

137



fig. **3/4**

3400.##.03/04

fig. **5/6**

3400.##.05/06

fig. **7/8**

3400.##.07/08

fig. **9/10**

3400.##.09/10

fig. **11/12**

3400.##.11/12

fig. **13/14**

3400.##.13/14

fig. **15/16**

3400.##.15/16

fig. **17/18**

3400.##.17/18

**Standard  
Blade**

**Standard  
Shank**

**Standard**

fig. **1/2**

3400.##.01/02

Gracey curettes disponibili in versione rigida con codice **3402**  
Gracey curettes with rigid tips availables with code **3402**

**Manici disponibili**  
**Available handles**

##

A0

G0


P0

DT06

DT08

DT10

EVO - M

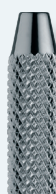


**Punte disponibili:**

Acciaio INOX • Titanio • DLC

**Available tips in**

Stainless Steel • Titanium • DLC coating

34  
138

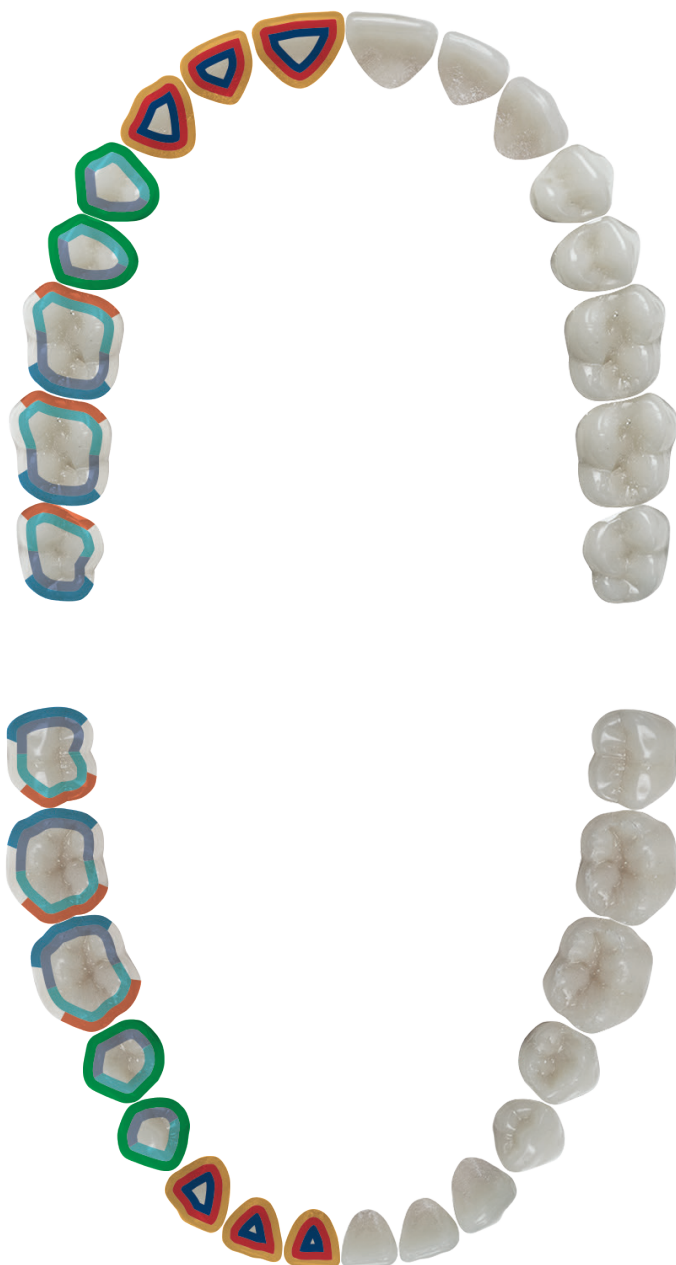

**Incisivi - Canini**  
**Incisors - Canines**



fig. 1/2



fig. 3/4

**Incisivi - Canini - Premolari**  
**Incisors - Canines - Premolars**



fig. 5/6

**Premolari - Molari**  
**Premolars - Molars**



fig. 7/8



fig. 9/10

**Premolari - Molari - Superficie mesiale**  
**Premolars - Molars - Mesial surface**



fig. 11/12



fig. 15/16

**Premolari - Molari - Superficie distale**  
**Premolars - Molars - Distal surface**



fig. 13/14



fig. 17/18


## Curette specifiche

Curette Specifiche per area sono progettate con lame di forme e angolature diverse a seconda dei denti o aree distinte all'interno della bocca, nelle quali andranno usate. Sono personalizzate per adattarsi all'anatomia di denti specifici, rendendole più efficienti per la levigatura e la levigatura radicolare in quelle aree. Offrono una migliore adattabilità ed efficienza nelle aree designate grazie al loro design specifico.

Le più importanti e conosciute fra queste sono sicuramente le **Gracey**.

## Area-specific Curettes

Area-specific curettes are designed with blades of different shapes and angles depending on the teeth or distinct areas within the mouth where they will be used. They are customized to fit the anatomy of specific teeth, making them more efficient for scaling and root planing in those areas. They offer better adaptability and efficiency in designated areas due to their specific design. The most important and well-known among these are certainly the **Gracey**.

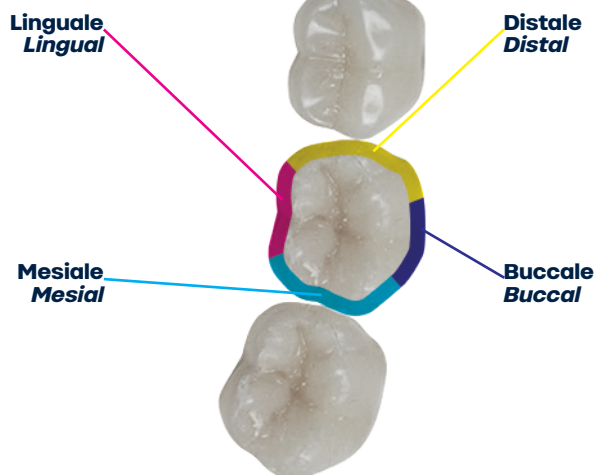





**Le lame delle curette Gracey** sono inclinate a 60 o 70 gradi rispetto al gambo inferiore e questa inclinazione specifica permette una migliore adattabilità alla superficie del dente e consente una rimozione più precisa del tartaro sotto la linea gengivale.

**Ogni lama delle curette Gracey** ha un solo margine tagliente, che è quello inferiore quando il gambo terminale è tenuto verticalmente, consentendo di ridurre il rischio di danneggiamento ai tessuti molli e facilita il controllo dello strumento durante le procedure.

**Le lame delle curette Gracey** sono curvate su due piani: verso l'alto e di lato. Questa doppia curvatura permette una migliore adattabilità alle superfici convesse e concave della radice del dente. Sono inoltre particolarmente efficaci nella pulizia e nel trattamento delle tasche parodontali e ideali per la levigatura radicolare.

**The blades of Gracey curettes** are angled at 60 or 70 degrees relative to the lower shank, and this specific inclination allows for better adaptability to the tooth surface and enables more precise removal of tartar below the gum line.

**Each blade of the Gracey curettes** has only one cutting edge, which is the lower edge when the terminal shank is held vertically. This helps reduce the risk of damaging soft tissues and facilitates control of the instrument during procedures.

**The blades of Gracey curettes** are curved in two planes: upward and sideways, to allow better adaptability to the convex and concave surfaces of the tooth root. They are also particularly effective in cleaning and treating periodontal pockets and are ideal for root planing.

**Denti anteriori**  
(tutte le superfici)

*Anterior teeth*  
(all surfaces)

**Denti anteriori**  
(tutte le superfici)

*Anterior teeth*  
(all surfaces)

**Incisivi – Canini –  
Premolari**

*Anterior teeth  
and Premolars*

**Superfici buccali e linguali  
dei denti posteriori**

*Buccal and lingual surfaces  
of posterior teeth*

**34**

140



fig. **1/2**

3400.DT08.01/02



fig. **3/4**

3400.DT08.03/04



fig. **5/6**

3400.DT08.05/06



fig. **7/8**

3400.DT08.07/08





**Superfici buccali  
e linguali dei molari**  
*Buccal and lingual  
surfaces of molars*

**Premolari – Molari  
(Superficie mesiale)**  
*Premolars – Molars  
(Mesial surface)*

**Premolari – Molari  
(Superficie distale)**  
*Premolars – Molars  
(Distal surface)*

**Premolari – Molari  
(Superficie mesiale)**  
*Premolars – Molars  
(Mesial surface)*

**Premolari – Molari  
(Superficie distale)**  
*Premolars – Molars  
(Distal surface)*



fig. **9/10**  
**3400.DT08.09/10**  
○



fig. **11/12**  
**3400.DT08.11/12**  
●



fig. **13/14**  
**3400.DT08.13/14**  
●



fig. **15/16**  
**3400.DT08.15/16**  
●



fig. **17/18**  
**3400.DT08.17/18**  
●

**34**  
142



fig. **1/2**

3404.##.01/02



fig. **3/4**

3404.##.03/04



fig. **5/6**

3404.##.05/06



fig. **7/8**

3404.##.07/08



fig. **9/10**

3404.##.09/10



fig. **11/12**

3404.##.11/12



fig. **13/14**

3404.##.13/14






fig. **15/16**

3404.##.15/16



fig. **17/18**

3404.##.17/18

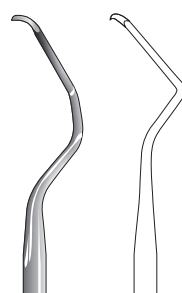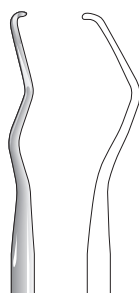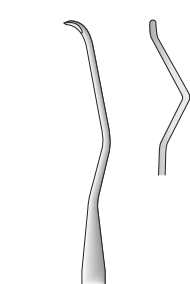

**Short  
Blade**

Long  
Shank

**Short Type**



La versione **Short-Type**, è progettata per favorire l'inserzione nelle tasche superficiali, in aree con accesso limitato come gli spazi interdentali stretti e per raggiungere le radici più piccole, furcazioni e solchi. Rispetto alla forma standard lo stelo terminale è di 3 mm più lungo, e la lama è più sottile e il 50% più corta.

The **Short-Type** version is designed to facilitate insertion into shallow pockets, areas with limited access such as narrow interdental spaces, and to reach smaller roots, furcations, and grooves. Compared to the standard form, the terminal shank is 3 mm longer, and the blade is thinner and 50% shorter.

##

A0

G0

P0

DT06


DT08

DT10

EVO - M

**Manici disponibili**

**Available handles**

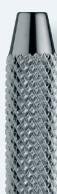

**Punte disponibili:**

**Acciaio INOX • Titanio • DLC**

**Available tips in**


**Stainless Steel • Titanium • DLC**

# Gracey Curettes - Long type



34

143

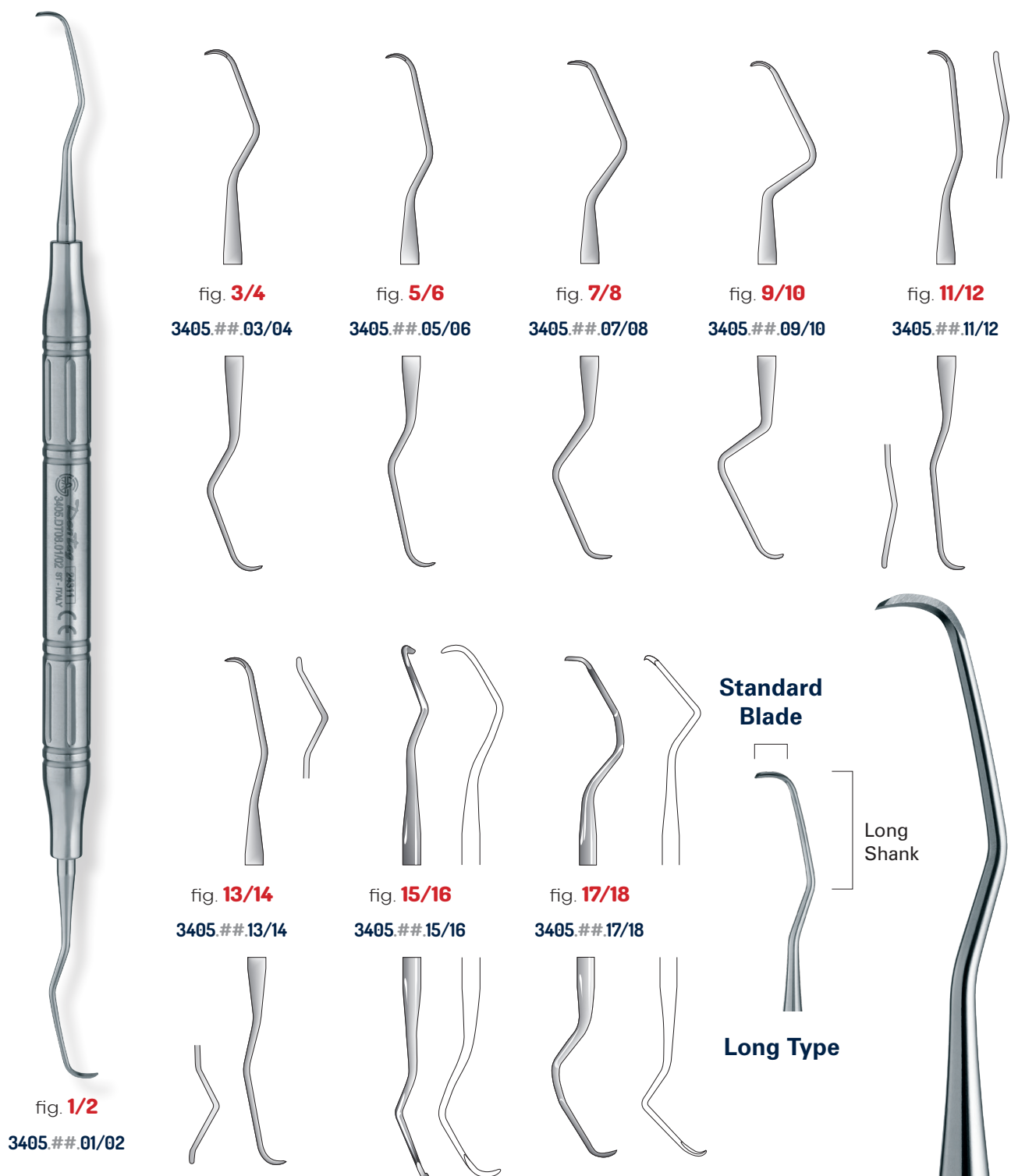

La versione **Long-Type**, è progettata per agevolare l'inserzione sub-gengivale, specie per le tasche parodontali più profonde e alle furcazioni. Riducendo la distensione del tessuto, facilitano la rimozione delle concrezioni intorno alla corona e permettono un migliore accesso anche alle radici. Rispetto alla forma standard **lo stelo terminale è di 3 mm più lungo e la lama è il 10% più sottile**.

The **Long-Type** version is designed to facilitate subgingival insertion, especially for deeper periodontal pockets and furcations. By reducing tissue distension, they aid in the removal of deposits around the crown and allow better access to the roots. Compared to the standard form, **the terminal shank is 3 mm longer, and the blade is 10% thinner**.



Manici disponibili  
Available handles

Punte disponibili:  
Acciaio INOX • Titanio • DLC  
Available tips in  
Stainless Steel • Titanium • DLC



# the Evolution of Species

## **Che cos'è il manico EVO**

Siamo sempre molto attenti ai cambiamenti e alle tendenze in un mercato che si evolve rapidamente e talvolta bruscamente.

I risultati di questa analisi hanno portato alla progettazione e produzione di un manico con diverse nuove funzionalità e miglioramenti rispetto ad altri prodotti simili sul mercato.

### **Materiale**

Nella gran parte dei casi, prodotti simili presentano manici in Silicone che, pur essendo un ottimo materiale resistente alle alte temperature, presenta però caratteristiche tattili che comportano, in caso di utilizzo prolungato, tensioni fisiche al tunnel carpale con conseguente affaticamento e dolore.

Per questo abbiamo scelto una via diversa, utilizzando un **materiale composito molto leggero** (g 11), **resistente alle sollecitazioni**, con un contatto fisico "secco", non affaticante, di **sicura presa**, resistente alle alte temperature e quindi **sterilizzabile in autoclave**.

### **Forma**

**Diametro all'impugnatura di 10,5 mm**, per ridurre al minimo i problemi al tunnel carpale dati dall'uso prolungato nel tempo di strumenti con impugnature di dimensioni ridotte.

## **What's EVO handle**

*We are always very attentive to changes and trends in a market that evolves rapidly and sometimes abruptly. The results of this analysis led to the design and production of a handle with several new features and improvements compared to other similar products on the market.*

### **Material**

*In most cases, similar products have silicone handles which, while being an excellent material resistant to high temperatures, have tactile characteristics that, in the case of prolonged use, lead to physical tension in the carpal tunnel resulting in fatigue and pain. For this reason, we chose a different path, using a **very lightweight composite material** (11 g), **resistant to stress**, with a "dry" physical contact, non-fatiguing, **secure grip**, resistant to high temperatures, and therefore **sterilizable in an autoclave**.*

### **Shape**

***Grip diameter of 10.5 mm**, to minimize carpal tunnel problems caused by prolonged use of instruments with smaller grips*



Made in Italy  
Dentag

EVO



Made in Italy  
Dentag

EVO



fig. **1/2**  
**3400.MY.1/2**



fig. **3/4**  
**3400.MR.3/4**



fig. **5/6**  
**3400.MB.5/6**



fig. **7/8**  
**3400.MG.7/8**



fig. **9/10**  
**3400.MW.9/10**



fig. **11/12**  
**3400.MK.11/12**



fig. **13/14**  
**3400.MV.13/14**



fig. **15/16**  
**3400.MO.15/16**



fig. **17/18**  
**3400.ML.17/18**



# Dentag

# Evo similar in body but completely different in Soul

34  
146

## Perché scegliere EVO

**Stato dell'Arte:** la totalità degli strumenti simili, presenti sul mercato, sono ricavati essenzialmente tramite due processi di stampaggio.

Uno prevede l'inserimento, nello stampo, di un tubo in alluminio o in acciaio sul quale si effettua l'iniezione termoplastica. In seguito verranno poi inserite le punte nel tubo in alluminio.


Un altro sistema prevede di inserire nello stampo uno strumento finito avente un'anima centrale di diametro ridotto (2,0 – 3,2mm), procedendo poi all'iniezione termoplastica.

## Why choose EVO?

**State of the Art:** all similar instruments on the market are essentially produced through two molding processes. One involves inserting an aluminum or steel tube into the mold, onto which thermoplastic injection is performed. Subsequently, the tips are inserted into the aluminum tube.

Another system involves inserting a finished instrument with a central core of reduced diameter (2.0 – 3.2 mm) into the mold, followed by thermoplastic injection.

Primo sistema  
First system

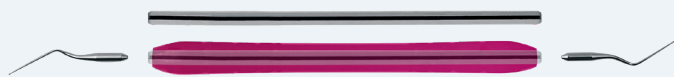

Secondo sistema  
Second system



## Soluzione EVO / Dentag®

Nel nostro caso, Il manico è ottenuto tramite processo di stampaggio a iniezione di materiale plastico composito in uno stampo nel quale sono state prima inserite, alle due estremità, due boccole in acciaio inossidabile opportunamente sagomate. Nel manico così ottenuto verranno poi inserite le punte definitive.

## The EVO / Dentag® solution

The way we manufacture the handle is by injecting the composite plastic material in the mould on which two ends we placed two small stainless-steel, shaped bushings. The tips are then inserted in the resulting handle.



## È evidente la differenza

**Negli strumenti simili,** presenti fino ad ora sul mercato, riscontriamo la presenza di due materiali distinti all'interno del manico (Termoplastico o Silicone / Alluminio o Acciaio).

**Nella nostra soluzione,** l'interno del manico è totalmente composto da un unico materiale termoplastico composito. Con questo procedimento si elimina la presenza di anime longitudinali interne in metallo con evidente riduzione di peso e con l'eliminazione di giochi e cricche dovute al contatto di materiali molto diversi tra loro. Si annullano così anche i problemi di potenziale proliferazione batterica, dovuti alla creazione di bolle d'aria, a causa dei diversi gradienti di espansione dei materiali, durante le fasi di riscaldamento e raffreddamento conseguenti ai cicli di sterilizzazione.

**Estetica:** profilo semplice, senza solchi o tacche profonde che possano causare accumulo di germi e batteri. Essendo materiale plastico è possibile la sua colorazione in svariate sfumature esteticamente gradevoli e con vantaggi per il riconoscimento immediato dello strumento.

## The difference is evident

**In similar instruments** currently on the market, we find the presence of two distinct materials within the handle (Thermoplastic or Silicone / Aluminum or Steel).

**In our solution,** the inside of the handle is entirely composed of a single composite thermoplastic material. This process eliminates the presence of internal longitudinal metal cores, resulting in significant weight reduction and the elimination of play and cracks due to the contact of very different materials. This also eliminates potential bacterial proliferation problems caused by the creation of air bubbles due to different material expansion gradients during the heating/cooling phases of sterilization cycles.

**Aesthetics:** simple profile, easy to wash and clean. No deep grooves or notches that could cause the accumulation of germs and bacteria. Being a plastic material, it can be colored in various aesthetically pleasing shades, providing advantages for immediate instrument recognition.



# I'm NERA

no need for  
resharpening





# Dentag the Evolution of Species

34

148

## Che cos'è il trattamento DLC

Il trattamento **DLC**, acronimo di "**Diamond-Like Carbon**", è un processo di rivestimento che applica un sottile strato di carbonio con proprietà simili a quelle del diamante su una superficie.

Questo rivestimento è noto per le sue eccellenti caratteristiche meccaniche, chimiche e tribologiche (relative all'attrito, all'usura e alla lubrificazione).

## Proprietà del DLC

**Elevata durezza:** il DLC ha una durezza che si avvicina a quella del diamante, rendendo **le superfici molto resistenti all'usura**.

**Bassa frizione:** il rivestimento riduce notevolmente l'attrito tra le superfici in movimento, **migliorando l'efficienza e riducendo l'usura**.

**Resistenza all'usura:** grazie alla sua durezza e **bassa frizione**, il DLC protegge le superfici dall'abrasione e dall'usura.

**Resistenza chimica:** il DLC è **resistente agli agenti chimici e alla corrosione**, aumentando la durabilità dei materiali rivestiti.

**Biocompatibilità:** il DLC è **biocompatibile**, il che significa che **può essere utilizzato in applicazioni mediche** e nel settore alimentare senza causare reazioni avverse.

## What's DLC coating

The **DLC** treatment, an acronym for "**Diamond-Like Carbon**", is a coating process that applies a thin layer of carbon with properties similar to those of diamond onto a surface. This coating is known for its excellent mechanical, chemical, and tribological characteristics (related to friction, wear, and lubrication).

## Properties of DLC

**High hardness:** DLC has a hardness that approaches that of diamond, **making surfaces highly resistant to wear**.

**Low friction:** the coating significantly reduces friction between moving surfaces, **improving efficiency and reducing wear**.

**Wear resistance:** thanks to its hardness and low friction, **DLC protects surfaces from abrasion and wear**.

**Chemical resistance:** **DLC is resistant to chemicals and corrosion**, increasing the durability of coated materials.

**Biocompatibility:** **DLC is biocompatible**, meaning **it can be used in medical and food applications without causing adverse reactions**.

## Perché scegliere DLC

La **riaffilatura degli strumenti** con punte taglienti, specie se di piccola dimensione, **è da sempre un serio problema** per ogni utilizzatore (medico, dentista o assistente) in quanto poche persone sono in grado di effettuare questa procedura, che richiede una grande manualità, senza intaccare la qualità finale dello strumento. Abbiamo quindi sviluppato una nuova tipologia di strumenti che, sfruttando le nuove nanotecnologie, con deposizione di materiali ceramici estremamente duri e resistenti, possano **risolvere alla radice il problema annullando o riducendo significativamente la necessità della riaffilatura**.

Per fare questo siamo partiti dalla materia prima utilizzando acciai inossidabili di qualità superiore, sottoponendoli poi a trattamenti termici scrupolosi e a una meticolosa affilatura effettuata manualmente all'interno dell'azienda. A questo punto **abbiamo sottoposto le punte al rivestimento in DLC**.

Il risultato è una grande resistenza all'abrasione e all'usura (**Alta durezza**), un basso coefficiente d'attrito (Antiaderenza) e un'ottima inerzia chimica (**Resistenza alla corrosione**).

**Non ultima la completa biocompatibilità**

## Why choose DLC coating

**Resharpen dental instruments**, especially smaller ones, **has always been a major challenge** for all users (doctors, dentists, or assistants), because very few can carry out this task, that requires very good manual skills, without compromising the integrity of the instrument itself. Hence, we have developed a new range of instruments that, by using new nano-technologies, through the deposition of extremely hard and resistant ceramic materials, **tackles the root of the problem, and cancels or significantly reduces the need for sharpening**.

To achieve this, we started from raw materials, using only higher quality stainless steels, that underwent rigorous heat treatments and were meticulously sharpened in-house. **Tips were then DLC coated**.

Moreover, the process takes place at low temperatures, exploiting vacuum deposition with the help of Plasma, without affecting the hardening and mechanical characteristics of the steel underneath.

The result is high resistance to abrasion and wear (**High hardness**), low friction coefficient (Non-stick) and excellent chemical inertia (**Corrosion resistance**).

**And, not least, full biocompatibility.**




# Curettes universali Universal curettes



Le **Curettes parodontali universali** si possono usare praticamente su tutte le superfici del dente; questa è la ragione per cui vengono chiamate "Universali". La lama ha un'angolazione di 90° rispetto allo stelo, è curvata su un solo piano e presenta ambedue i bordi taglienti. Queste caratteristiche le rendono particolarmente adatte per la rimozione di lievi e moderate quantità di tartaro.

**Universal periodontal curettes** can be used on virtually all tooth surfaces; this is why they are called "Universal." The blade is angled at 90° to the shank, is curved in only one plane, and has both cutting edges. These features make them particularly suitable for the removal of light to moderate amounts of tartar.

34  
149

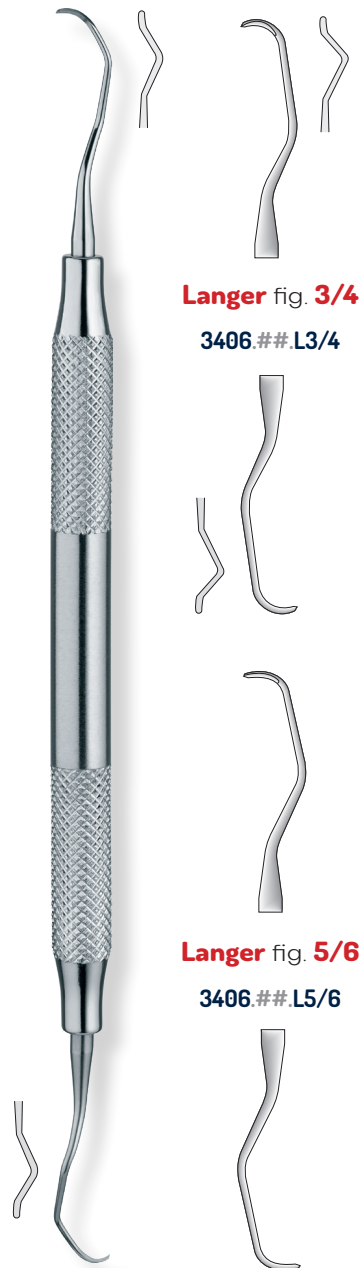

**Langer fig. 3/4**

3406.##.L3/4

**Langer fig. 5/6**

3406.##.L5/6

**Langer fig. 1/2**



3406.##.L1/2

fig. 1/2 Denti mandibolari posteriori.  
Superfici Mesiali-Distali.  
Mandibular posterior teeth:  
Mesial-Distal surfaces.

fig. 3/4 Denti mascellari posteriori.  
Superfici Mesiali-Distali  
Maxillary posterior teeth:  
Mesial-Distal surfaces.

fig. 5/6 Denti anteriori.  
Anterior teeth:

**Universal curette**

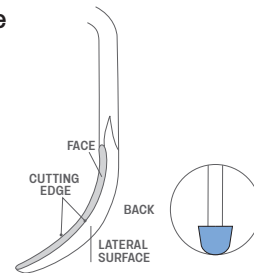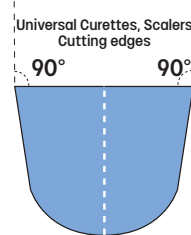

La **curette Langer** abbina una lama universale, caratterizzata da due bordi paralleli e un angolo di 90 gradi tra il gambo terminale e la faccia della lama, con il design del gambo delle curette Gracey specifiche per l'area.

Le forme delle curette Langer **consentono la rimozione del tartaro e della placca sia dalle superfici mesiali che quelle distali**, semplificando la selezione dello strumento da parte dell'igienista e richiedendo meno passaggi da uno strumento all'altro.

L'angolazione del gambo in stile Gracey è ideale per le aree difficili da raggiungere, come le tasche parodontali profonde e le superfici radicolari posteriori. **Con soli tre strumenti è possibile accedere a tutta la bocca.**

The **Langer curette** combines a universal blade, characterized by two parallel edges and a 90-degree angle between the terminal shank and the blade face, with the shank design of area-specific Gracey curettes. The shapes of the Langer curettes **allow for the removal of tartar and plaque from both mesial and distal surfaces**, simplifying the instrument selection for the hygienist and requiring fewer transitions between instruments. The Gracey-style shank angulation is ideal for hard-to-reach areas, such as deep periodontal pockets and posterior root surfaces. **With only three instruments, it is possible to access the entire mouth.**



**Manici disponibili**

**Available handles**

**Punte disponibili:**

**Acciaio INOX • Titanio • DLC**

**Available tips in**

**Stainless Steel • Titanium • DLC**




**Columbia fig. 4R/4L**

3412.##.04R/04L


**Columbia fig. 13/14**

3412.##.13/14


**Columbia fig. 2R/2L**

3412.##.02R/02L


**Columbia fig. 412**



3412.##.410


**Columbia fig. HU1/2**


3412.##.HU1/2


**De Marco fig. 1**

3421.##.01

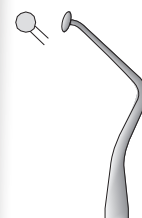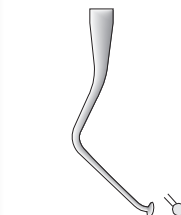
**De Marco fig. 2**

3421.##.02

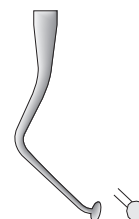

**Zerfing**

3418.A0.01

3418.DT06.01

A0


## A0 G0 P0 DT06 DT08 DT10 EVO - M

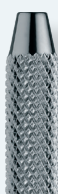**Manici disponibili**
**Available handles**

**Punte disponibili:**
**Acciaio INOX • Titanio • DLC**
**Available tips in**
**Stainless Steel • Titanium • DLC**

# Curettes universali Universal curettes

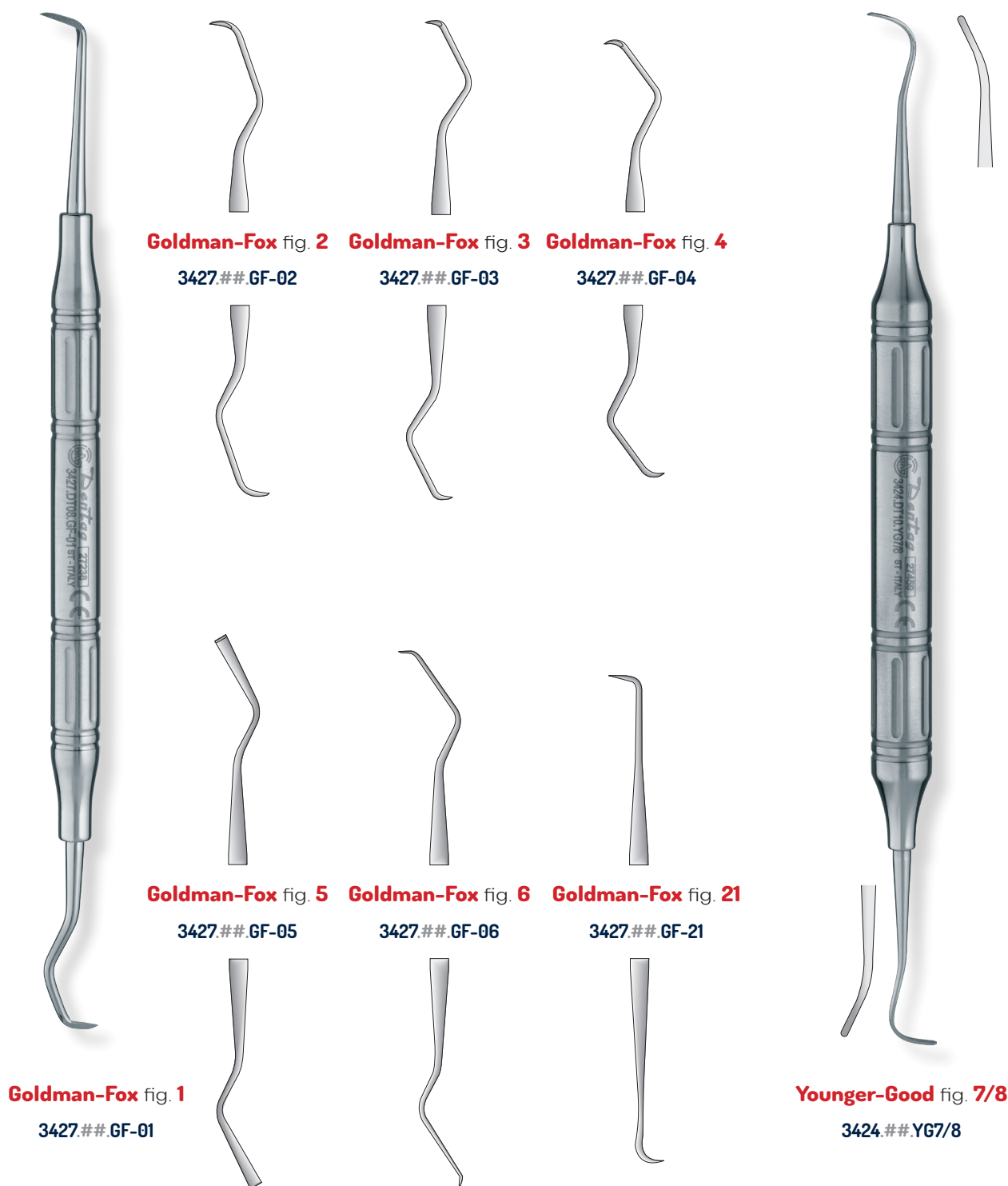

**34**  
151



**Goldman-Fox fig. 1**  
3427.##.GF-01

**Goldman-Fox fig. 5** 3427.##.GF-05  
**Goldman-Fox fig. 6** 3427.##.GF-06  
**Goldman-Fox fig. 21** 3427.##.GF-21


**Younger-Good fig. 7/8**  
3424.##.YG7/8




**Punte disponibili:**  
**Acciaio INOX • Titanio • DLC**  
*Available tips in*  
**Stainless Steel • Titanium • DLC**




**Mc Call** fig. 11/12  
3430.##.11/12

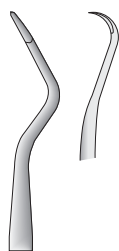


**Mc Call** fig. 11A/12A  
3430.##.11A/12A

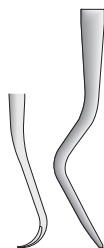


**Mc Call** fig. 17/18  
3430.##.17/18

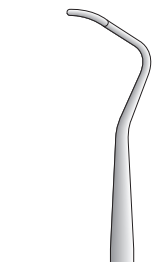

**Mc Call** fig. 13/14  
3430.##.13/14

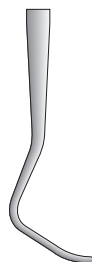


**Mc Call** fig. 19/20  
3430.##.19/20

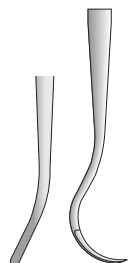

**Mc Call** fig. 13S/14S  
3430.##.13S/14S



**Mc Call** fig. 17S/18S  
3430.##.17S/18S

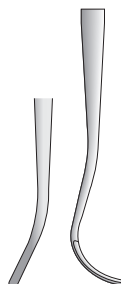

**Barnhart** fig. 1/2  
3433.##.1/2



**Barnhart** fig. 5/6  
3433.##.5/6



##

A0

G0

P0


DT06

DT08

DT10

EVO - M

Manici disponibili  
Available handles

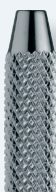


Punte disponibili:  
Acciaio INOX • Titanio • DLC

Available tips in

Stainless Steel • Titanium • DLC



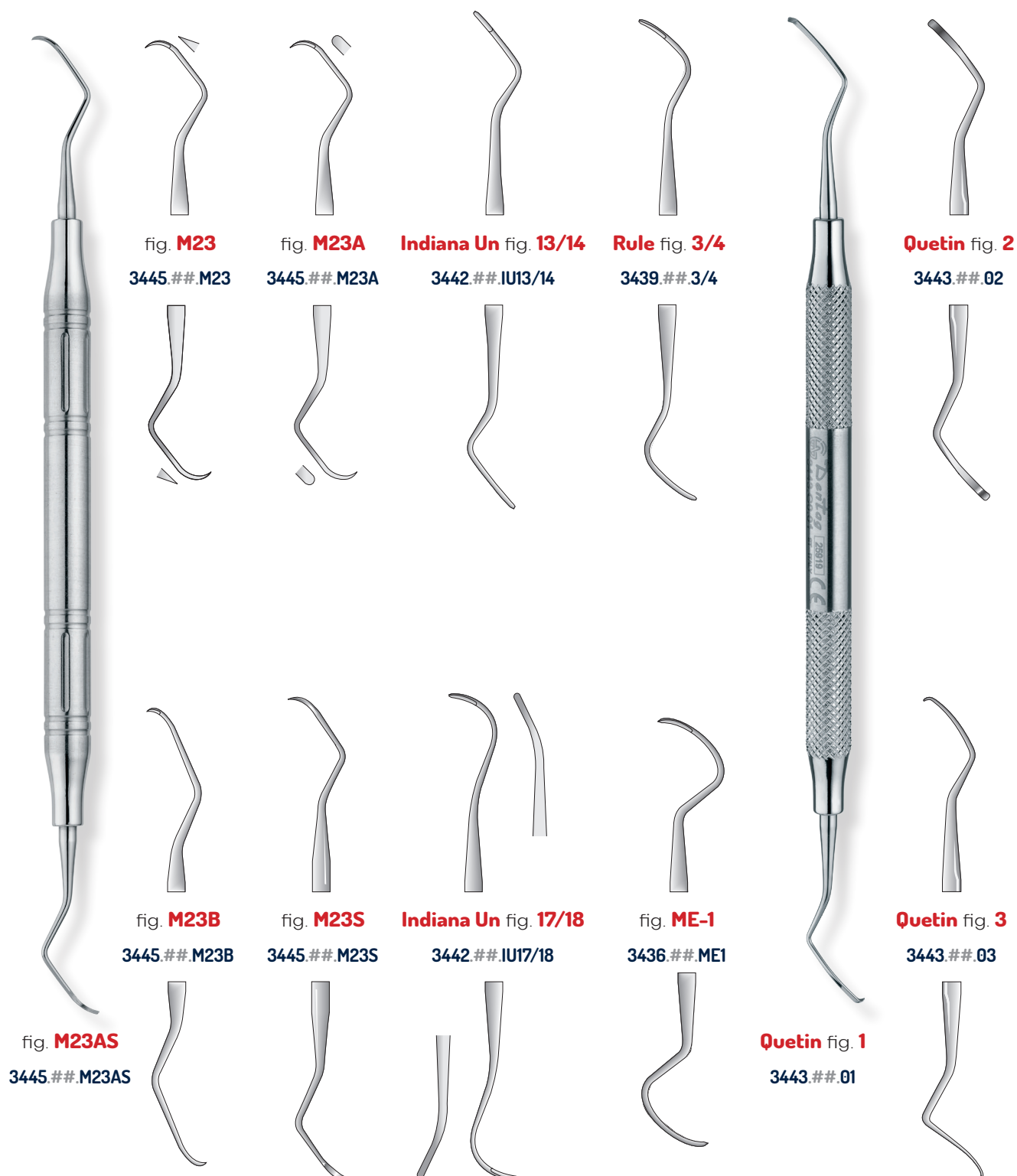

**Furcation Curettes**

## AO GO PO DT06 DT08 DT10 EVO - M

**Manici disponibili**  
**Available handles**



**Punte disponibili:**  
**Acciaio INOX • Titanio • DLC**  
**Available tips in**  
**Stainless Steel • Titanium • DLC**



fig. **U15/30**  
3458.##.U15/30



fig. **U15/33**  
3458.##.U15/33



fig. **H5/33**  
3458.##.H5/33

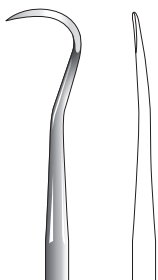
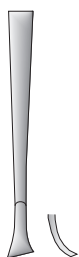
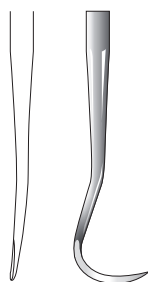


fig. **H6/H7**  
3458.##.H6/H7

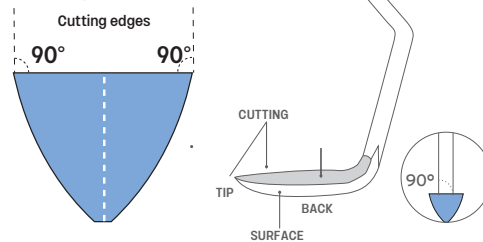


fig. **1R/1L**  
3455.##.01R/01L




## Scalers

### Straight blade



### Curved blade

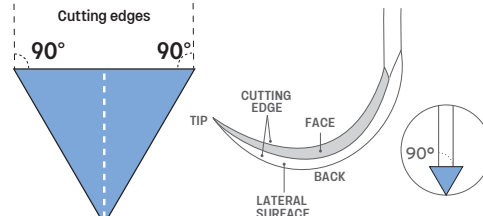

**Gli Scalers** sono strumenti ideati per la rimozione del tartaro sopragengivale e delle macchie superficiali con la loro punta affilata e appuntita.

Sono utilizzati principalmente per la rimozione rapida di grandi depositi di tartaro visibili sopra il margine gengivale.

Molto efficaci nel rimuovere tartaro duro e incrostato sopra il margine gengivale.

Meno indicati per l'uso sottogengivale a causa della punta appuntita, che potrebbe causare traumi ai tessuti molli.

**Scalers a falce:** hanno una punta appuntita e sono usati principalmente per rimuovere grandi depositi di tartaro dalle corone dei denti, particolarmente efficaci nelle aree interprossimali e sulle superfici sopragengivali.

**Scalers Jacquette:** presentano una punta a forma triangolare e sono progettati per accedere a tasche parodontali profonde e rimuovere calcolo e placca dalle superfici radicolari.

**Hoe Scalers:** le lame hanno forme simili a una zappa da giardinaggio, con una lama ampia e piatta, sono utilizzati per rimuovere calcolo e placca dalle superfici dei denti sotto la linea gengivale.

**Scalers are instruments designed for the removal of supra-gingival calculus and surface stains with their sharp and pointed tips.** They are primarily used for the rapid removal of large deposits of calculus visible above the gum line. They are very effective in removing hard and encrusted calculus above the gum line. They are less suitable for subgingival use due to their pointed tip, which could cause trauma to the soft tissues.

**Sickle Scalers:** These have a pointed tip and are mainly used to remove large deposits of calculus from the crowns of teeth, particularly effective in interproximal areas and on supra-gingival surfaces.

**Jacquette Scalers:** These feature a triangular-shaped tip and are designed to access deep periodontal pockets and remove calculus and plaque from root surfaces.

**Hoe Scalers:** These have blades similar to a gardening hoe, with a broad, flat blade, and are used to remove calculus and plaque from the tooth surfaces below the gum line.

##

A0

G0

P0


DT06

DT08

DT10

EVO - M

Manici disponibili  
Available handles

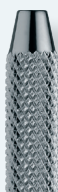


Punte disponibili:  
Acciaio INOX • Titanio • DLC

Available tips in  
Stainless Steel • Titanium • DLC

# Scalers parodontali Periodontal scalers



**34**  
155

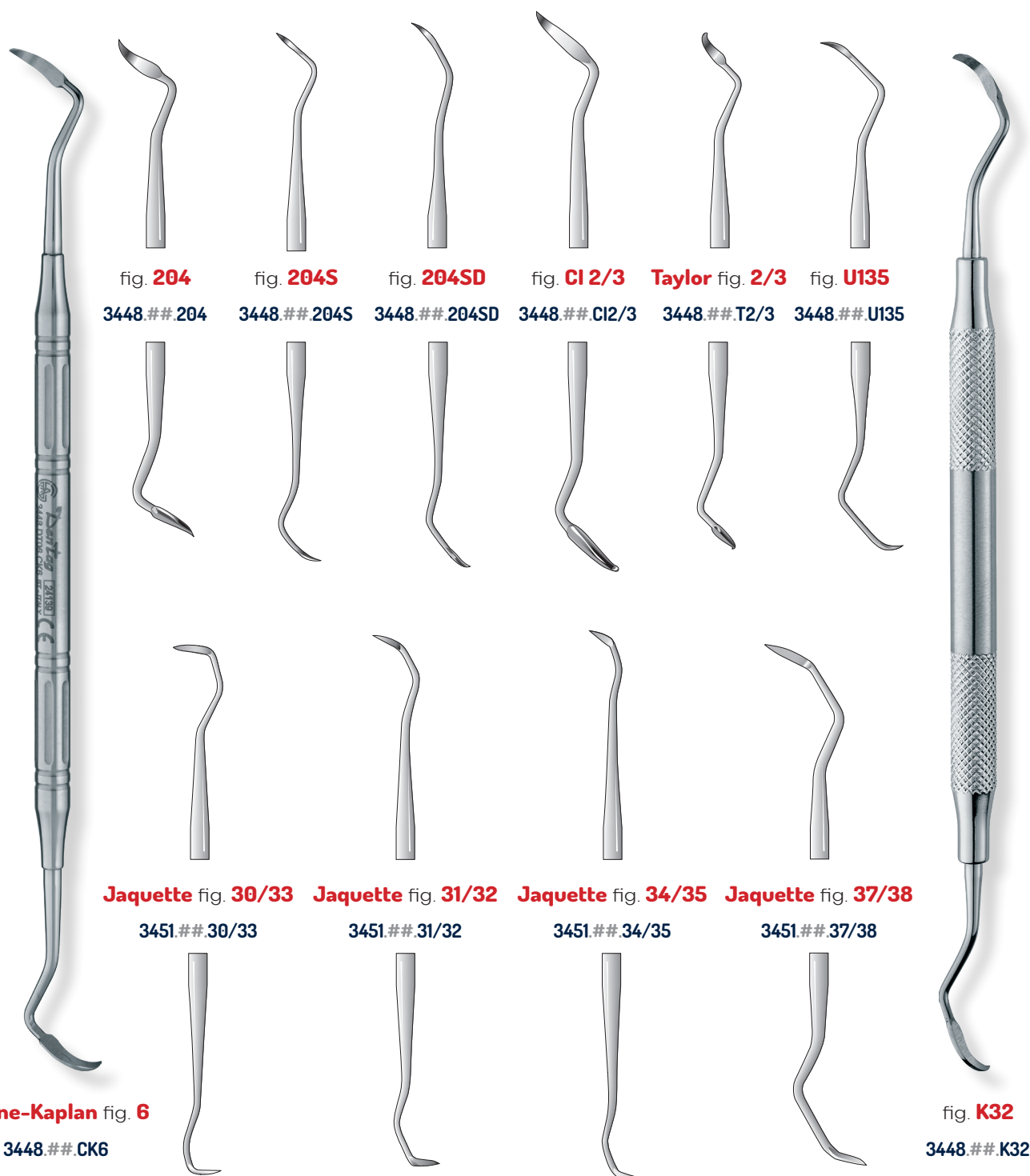

Punte disponibili:  
**Acciaio INOX • Titanio • DLC**  
Available tips in  
**Stainless Steel • Titanium • DLC**



# Dentag

## Scalers singoli Singles scalers

**34**

156



fig. **1**

3455.##.01



fig. **1R**

3455.##.01R



fig. **1L**

3455.##.01L



fig. **2R**

3455.##.02R



fig. **2L**

3455.##.02L



**Towner** fig. **U15**

3458.##.U15



fig. **H5**

3458.##.H5



fig. **H6**

3458.##.H6



fig. **H7**

3458.##.H7



fig. **33**

3451.##.33



fig. **31**

3451.##.31



fig. **32**

3451.##.32



fig. **34**

3451.##.34




fig. **35**

3451.##.35

## A0 DT06

Manici disponibili

Available handles

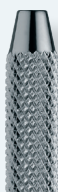

Punte disponibili:

**Acciaio INOX • Titanio • DLC**

Available tips in

**Stainless Steel • Titanium • DLC**